



Clarity™

Soluciones estéticas para ortodoncia

3M™ Clarity™ Ultra Brackets de autoligado

# Tratamientos de confianza. Sonrisas radiantes.




# **Creamos bonitas sonrisas para sus pacientes y el éxito para su consulta.**

Como usted sabe, el negocio y los modelos de tratamiento de ortodoncia están cambiando. Los pacientes tienen más opciones que nunca, y están jugando un papel activo en la toma de decisiones cuando se trata de los productos que compran. Al mismo tiempo, la tecnología emergente está impulsando la innovación y las nuevas eficiencias en la práctica de la ortodoncia.

En medio de este cambio, su objetivo sigue siendo el mismo: Crear bonitas sonrisas que permanezcan en sus pacientes toda la vida.

# Muestre su experiencia. Logre resultados precisos.

Los brackets de autoligado 3M™ Clarity™ Ultra ofrecen control de rotación, versatilidad mejorada y el concentrador de fuerza exclusivo de 3M diseñado para un descementado consistente y predecible.

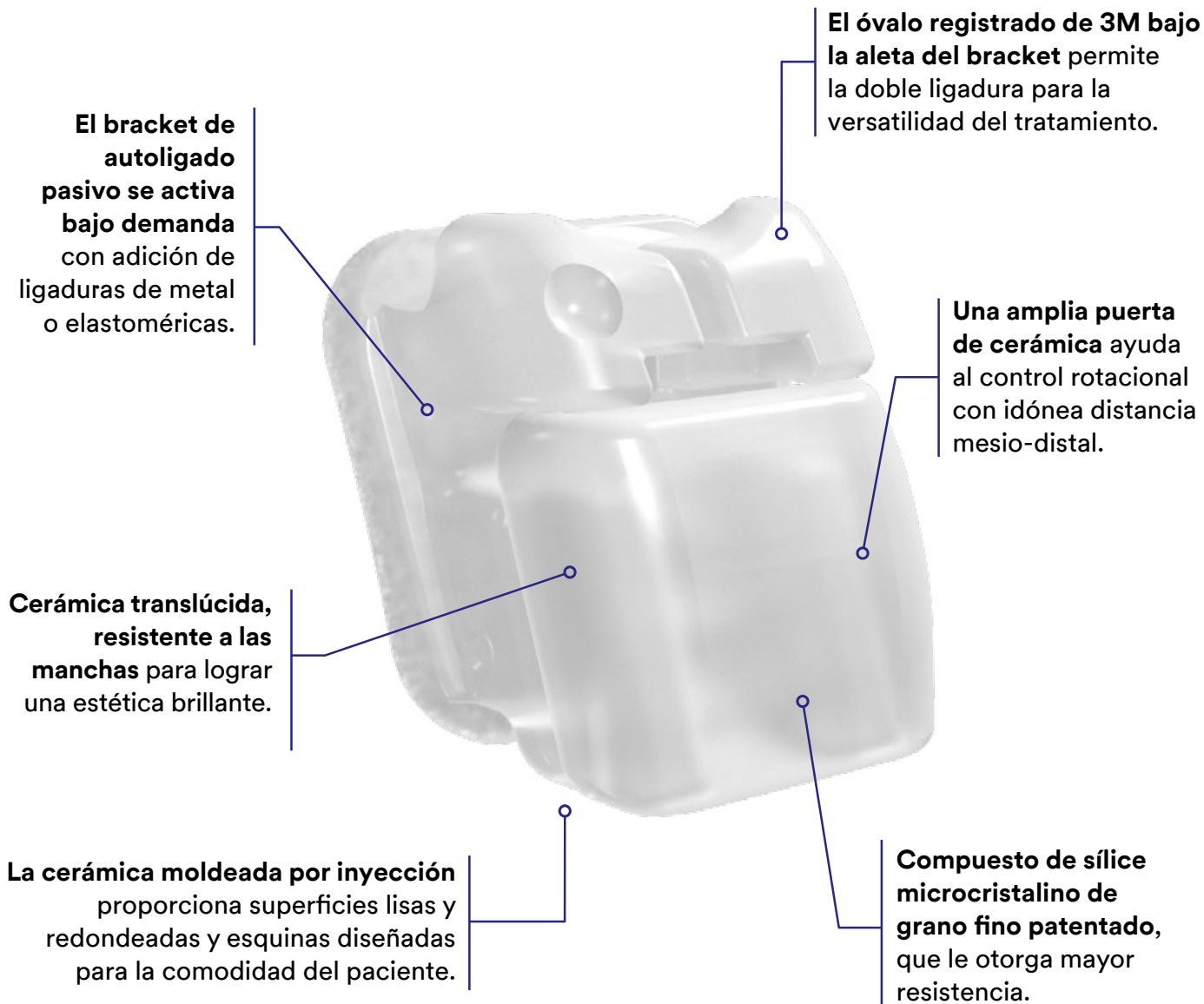

Las puertas soportan más que el uso típico de tratamiento. **2 veces**

**Puertas de autoligado fiables** que soportan más de 2 veces los ciclos de apertura y cierre del tratamiento típico.

Tratamiento típico de 2 años

**2 veces**

Fiabilidad de la puerta del bracket 3M Clarity Ultra




# Optimizamos su eficiencia y resultados.


Usted y sus pacientes quieren lo mismo: opciones de tratamiento efectivas con resultados positivos. Para lograr esto, necesita control y previsibilidad de principio a fin. Los brackets Clarity Ultra le brindan esa capacidad, lo que permite una planificación de tratamiento exitosa para generar resultados precisos.



Cambios de arcos más fáciles sin ligaduras.

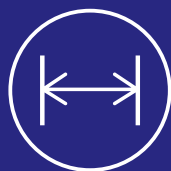


Amplia puerta de cerámica que ayuda a controlar la rotación con un amplio espacio mesial-distal.

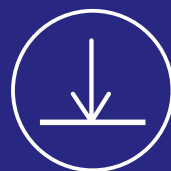

Pasivo o activo bajo demanda.




Control de rotación sin agregar accesorios.

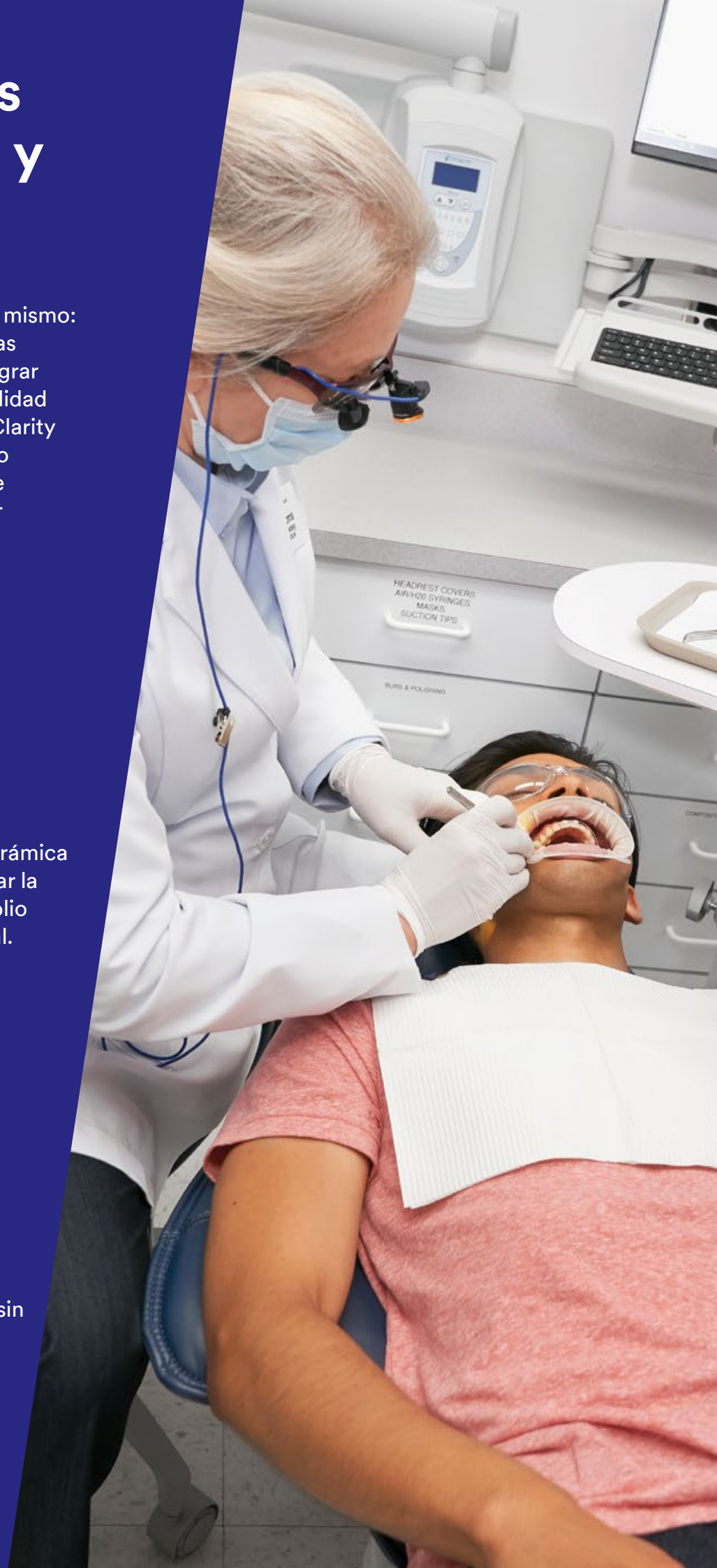

# Proceso de cementado simple y eficiente.

Potenciado por la tecnología, el Sistema 3M™ APC™ Flash-Free es el sistema de adhesión más eficiente en ortodoncia. Nuestro diseño innovador crea un sustrato de unión adhesiva único en la base del bracket que le ahorra tiempo e impacta positivamente en la satisfacción del paciente.

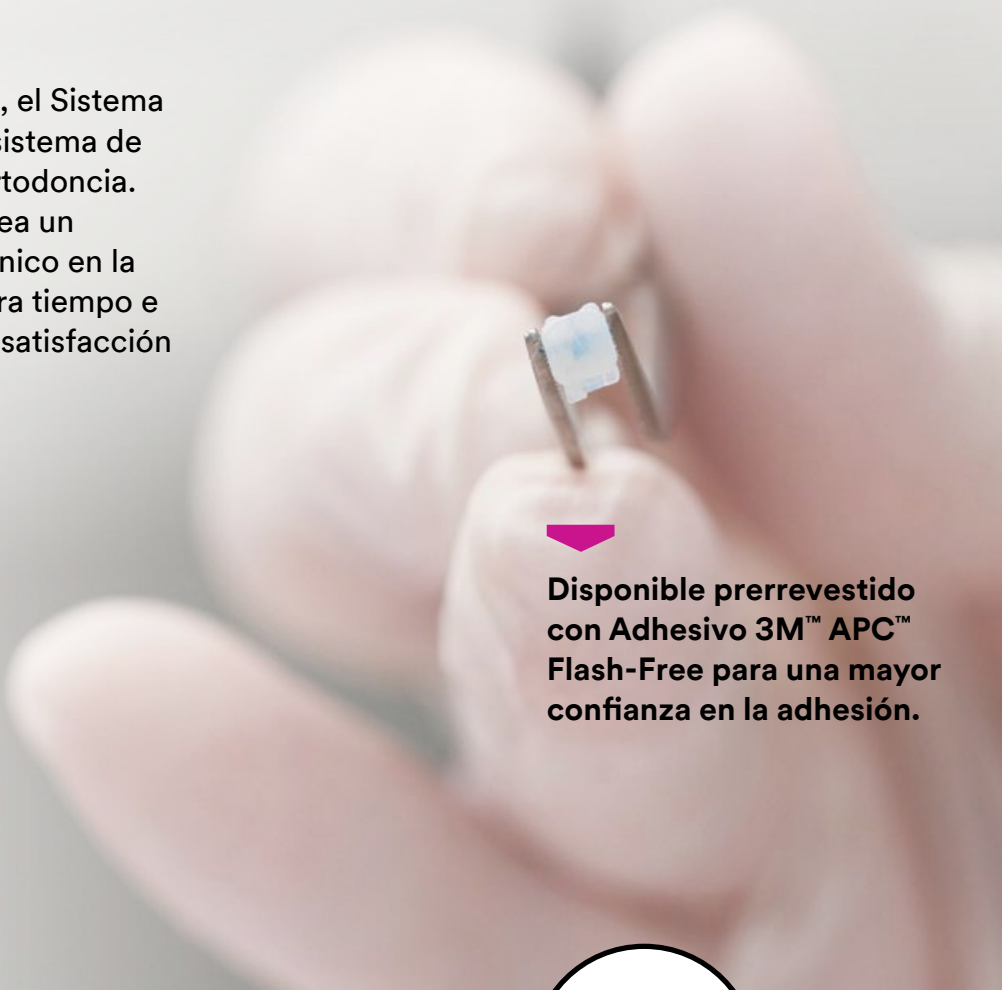

Disponibles prerrevestidos con Adhesivo 3M™ APC™ Flash-Free para una mayor confianza en la adhesión.



## Ahorra tiempo y costos

- ✓ Cementado más rápido y eficiente que los brackets no prerrevestidos.
- ✓ Elimina el paso de remoción del sobrante.
- ✓ Limpieza simple y fácil al descementar.



## Eficacia superior de cementado

- ✓ El tiempo de adhesión se reduce hasta un 40 % por bracket.
- ✓ Dado que no se elimina el sobrante, se reduce el movimiento accidental del bracket después del posicionamiento, lo que reduce la necesidad de reposicionar.
- ✓ Protege el esmalte de los dientes debajo del adhesivo.

# Impulsado por la innovación en la que puede contar.

Cuando elige el sistema de brackets Clarity Ultra, elige la tecnología de vanguardia, la previsibilidad y el servicio al cliente de 3M en los que confía. Lo que es más importante, tiene el control de una solución estéticamente agradable que funciona durante todo el proceso de tratamiento y ayuda a promover el crecimiento de su consulta.



## Maximizamos la eficiencia

- ✓ Puntos de identificación codificados por colores para simplificar la selección del bracket.
- ✓ Marcas de referencia verticales y horizontales para una colocación fácil del bracket en el diente.
- ✓ Los brackets se envían con las puertas abiertas, lo que elimina este paso antes de colocar el arco.
- ✓ Concentrador del estrés único diseñado para un descementado predecible.



## Fiabilidad de rendimiento

- ✓ Mecanismo de puerta diseñado para resistir aperturas y cierres no planificados.
- ✓ Diseñado para proporcionar un sonido audible de "clic" cuando la puerta se abre o se cierra.
- ✓ Las puertas duran más de 2 veces los ciclos de apertura y cierre del tratamiento típico.



3M™ Clarity Ultra™  
Brackets de autoligado



3M™ Serie Victory™  
Superior Fit Buccal Tubes



3M™ Forsus™  
Correctores Clase II

## Una metodología. Eficiencia de práctica optimizada.

Desarrollados por 3M Science, los brackets de autoligado Clarity Ultra y otras soluciones de 3M, incluido el adhesivo APC Flash-Free, los Correctores Clase II 3M™ Forsus™ y el Sistema de Aparatología Versátil 3M™ MBT™, están diseñados para trabajar juntos para brindar a los ortodoncistas un control eficiente y personalizado que permitan lograr resultados con una sola metodología de tratamiento.







# Una solución clara que inspira sonrisas.


Diseñados para integrarse con el color natural del diente, los brackets Clarity Ultra brindan una solución completamente estética. Translúcido y resistente a las manchas, el bracket no tiene partes metálicas visibles, por lo que tiene una apariencia atractiva.

La ausencia de ligaduras elastoméricas que pueden manchar durante el tratamiento también mejora el atractivo visual. Las superficies y los bordes cerámicos lisos y redondeados están diseñados para brindar comodidad durante el curso del tratamiento que tanto usted como sus pacientes apreciarán.



**Un compañero perfecto para una sonrisa radiante y sana.**

# 3M™ Clarity™ Ultra Brackets de autoligado

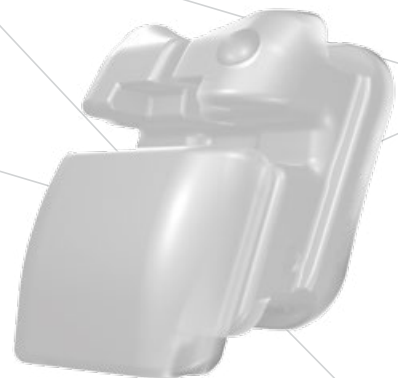

## Prescripción del Sistema de aparatos 3M™ MBT™

Maxilar			In/Out		Referencia - 0,022 in	
Diente	Torsión	Angulación	in	mm	Izq.	Der.
Central	+17°	4°	0,026	0,66	003-301	003-302
Lateral	+10°	8°	0,035	0,89	003-303	003-304
Cúspide con gancho	0°	8°	0,021	0,53	003-307	003-308
Bicúspide con gancho	-7°	0°	0,029	0,74	003-310	003-311

Mandibular			In/Out		Referencia - 0,022 in	
Diente	Torsión	Angulación	in	mm	Izq.	Der.
Anterior	-6°	0°	0,045	1,14	003-350	
Cúspide con gancho	0°	3°	0,020	0,51	003-353	003-354
1ª bicúspide con gancho	-12°	2°	0,030	0,76	003-357	003-358
2ª bicúspide con gancho	-17°	2°	0,034	0,86	003-361	003-362

Agregue el Prefijo "4" para el Sistema adhesivo Flash-Free 3M™ APC".  
Ejemplo: 4003-301

## Kits de pacientes

	Referencia - 0,022 in
Gancho Sup./Inf. Der./Izq. 5x5	003-111
Gancho Sup. Der./Izq. 5x5	003-116

Agregue el Prefijo "4" para el Sistema adhesivo Flash-Free 3M™ APC".

## Instrumentos para el Sistema Ultra SL

	Referencia
Instrumento de descementado 3M™ Unitek™	804-175
Instrumento de apertura y cierre 3M™ Unitek™	804-155



REF 804-155



REF 804-175





Clarity™

Soluciones estéticas para ortodoncia

# Trate con Clarity.

Nuestra cartera completa de opciones de tratamiento estético natural está basada en la ciencia de 3M y alimentada por la creatividad. La innovación impulsa nuestra tecnología de punta y ofrece la elección y el control que busca.

Nuestro compromiso es colaborar con los ortodoncistas para proporcionar soluciones de tratamiento estético flexibles y personalizadas que muestren su experiencia y garanticen resultados precisos. Juntos, podemos cambiar vidas creando sonrisas sanas y radiantes.





**Visite [3M.com/ClarityUltra](http://3M.com/ClarityUltra) o solicite más información a su representante de 3M Oral Care.**



**3M Oral Care**  
**3M España, S.L.**  
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25  
28027 Madrid  
[www.3MUnitek.es](http://www.3MUnitek.es)

**[www.3MUnitek.es](http://www.3MUnitek.es)**



3MOralCareEspana @3MOralCareES 3MOralCare

3M, APC, Clarity, Forsus, MBT, Victory Series y Unitek son marcas comerciales de 3M. Impreso en España.  
© 3M 2018. Todos los derechos reservados.